

SoftCup™ Advanced Cup Feeder

HU Használati útmutató



Rendeltetésszerű használat

A SoftCup™ Advanced Cup Feeder anyatej és ehhez hasonló állagú tápszer adagolására lett tervezve.

Fontos biztonsági információ

Olvassa el az utasításokat használat előtt.

- Kizárólag a használati útmutatóban leírt, rendeltetésszerű módon használja a terméket.
- Több mint egy gyermeknél való használat, illetve nem megfelelő tisztítás egészségügyi kockázatot jelent és keresztfertőzést okozhat.
- Kizárólag eredeti Medela tartozékokat használjon.
- Vizsgálja meg az egyes használatok előtt. Dobja ki a károsodás első jelei láttán, penészedés vagy elvékonyodás láttán.
- Soha ne hagyja a csomagolást és tartozékokat őrizet nélkül. Tartsa őket távol gyermekektől.

ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.

Fontos biztonsági előírások

- A műanyag palackok és tartozékok törékennyé válhatnak fagyasztott állapotban és leejtve eltörhetnek.
- A palackok és tartozékok károsodhatnak, ha pl.: leejtik, túl erősen csavarják rá a kupakot, vagy felborul.
- Kezelje óvatosan a palackokat és a tartozékokat.
- Ne használja a palackokat vagy tartozékokat, ha eltörtek vagy károsodtak.

Tisztítás

Fontos

- Kizárólag ivóvizet használjon tisztításhoz.
- Tisztítsa meg az összes tartozékot az első használat előtt (ld. lent).
- Tisztítsa meg az összes tartozékot használat után.
- Az etető tisztításakor ne fordítsa ki a tartályt.
- Ne tisztítsa meg a tartályt hegyes vagy kemény tárgyakkal (pl.: kefe, fogpiszkáló vagy hegyes körmök).
- Az alábbi tisztítás instrukciók általános jellegűek. Országspecifikus szabályzatok és irány útmutatás felől érdeklődjön Medela ügynöknél vagy látogassa meg honlapunkat weboldalunkat (www.medela.hu).

Az egyes használatok után

- Szerelje szét az etetőt alkatrészeire. Ügyeljen arra, hogy válassza le a sárga színű szeleplemezt a tartályról. Ezen kívül válassza le a fehér membránt a szeleplemezeiről.

Megjegyzés: A palackban maradt tej újrafelhasználható, de a tartályban maradt tejet ki kell önteni. Ehhez tartsa az etetőt a mosogató felett. Óvatosan csavarja le a kupakot és távolítsa el a tartállyal és a szeleplemezzel együtt, hogy ne hagyja kiöntse a tejet. Öntse ki a maradék tejet a tartályból.

- Öblítse le az összes alkatrészt hideg vízzel (kb. 20 °C). Öblítse ki alaposan a tartály részeit, a maradék tej eltávolításához.
- Tisztítsa meg az összes alkatrészt meleg, szappanos vízzel (kb. 30 °C-os). Használjon egy kereskedelemben kapható, lehetőleg mesterséges illatanyag- és színezékmentes tisztítószerrel (kórházi használatra kialakított: 5–15 % nemionos felületaktív anyag, pH semleges).
- Öblítse le az összes alkatrészt hideg vízzel (kb. 20 °C).
- Törölje szárazra egy tiszta ronggyal vagy hagyja megszáradni egy tiszta rongyon.
- A termék mosogatógépbe is helyezhető. Helyezze az alkatrészeket a legfelső rekeszre, vagy az evőeszköz részbe. Használjon kereskedelemben kapható mosogatószerrel.

Otthoni használat:

Első használat előtt és naponta egyszer:

Tisztítsa meg az etetőt az "Egyes használatok után" szekcióban leírtak alapján. Fertőtlenítse az etetőt a "Fertőtlenítés" szekcióban leírtak alapján.

Kórházi használat:

Az első használat előtt – naponta egyszer – mielőtt egy másik gyermek használná.

- Tisztítsa és fertőtlenítse az etetőt a "Fertőtlenítés" szekcióban leírtak alapján.
- Ha a nemzeti, regionális vagy helyi szabályzatok megkövetelik, sterilizálja az etetőt amint az a "Sterilizálás" szekcióban szerepel.

Fertőtlenítés

Otthoni használat

- Merítse az összes alkatrészt vízbe és forralja öt percre.
- Vagy használja a Quick Clean gőzfertőtlenítő zacskót az instrukcióknak megfelelően.
- Törölje meg egy száraz ronggyal vagy hagyja megszáradni.

Kórházi használat

- Tisztítsa és fertőtlenítse az alkatrészeket egy tisztító- és fertőtlenítőberendezésben. Használjon megfelelő betéteket az apró alkatrészekhez, illetve egy általános, kereskedelemben kapható, tisztító- és fertőtlenítőberendezéshez való tisztítószeret. (NTA-, foszfát-, klór- és felületaktív anyag-mentes, lúgos pH szintű 11.7–12.7).
- Fertőtlenítse 5 percen keresztül 93 °C hőmérsékleten.
- Válasszon ki egy megfelelő programot a fenti instrukciók alapján, amely tartalmazza a szárítást. Ha nincs szárító program, törölje át az alkatrészeket egy tiszta ronggyal vagy hagyja megszáradni egy tiszta rongyon.

Sterilizálás

Kórházi használat

- Ügyeljen arra, hogy a termékalkatrészek tiszták, szárazak és sértetlenek.
- Csomagolja be az alkatrészeket steril csomagolóanyagba.
- Sterilizálja a terméket az autoklávba 134 °C-on 5 percre. A sérülés elkerülése érdekében, ne pakoljon a termékre, illetve ne fejtessen ki külső nyomást.


Tárolás

Helyezzen be a tiszta alkatrészeket egy tiszta tároló táskába vagy hasonló tiszta környezetbe. Ügyeljen arra hogy a maradék nedvesség felszáradjon. Ne tárolja az alkatrészeket légmentesen zárt konténerben/táskában.

Használat


- A SoftCup a pohárból való etetés alternatívája.
- Ajánlott az első etetést szakember/szakképzett személyzet felügyelete alatt történjen.
- Mossa meg alaposan a kezeit vízzel és szappannal mielőtt hozzáérne a termékhez. Törölje meg egy tiszta törölközővel vagy papírtörölközővel.
- Etetés előtt mindig ellenőrizze a tápszer hőmérsékletét.

A termék összeszerelése

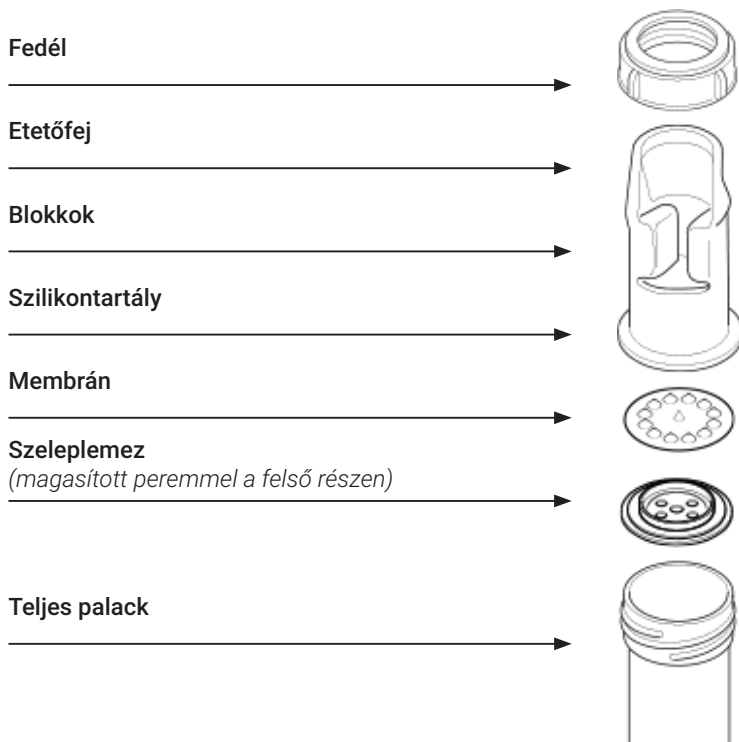

- Tartsa a szeleplemezet úgy, hogy a magasított perem legyen felül. Helyezze a fehér membránt a szeleplemezre, a peremen belülre. Nyomja meg a membrán gombjait a szeleplemez közepén levő lyukba.
- Töltse meg a palackot a szükséges mennyiségű tejjel.
- Helyezze az összeszerelt szelepet a magasított peremmel felfelé a palack szájára.
- Helyezze a tartályt a szeleplemezre úgy, hogy a perem tartályon belül legyen.
- Csúsztassa a fedelet a tartályra. Csavarja össze az összes alkatrészt a fedéllel együtt.

A cumi megtöltése

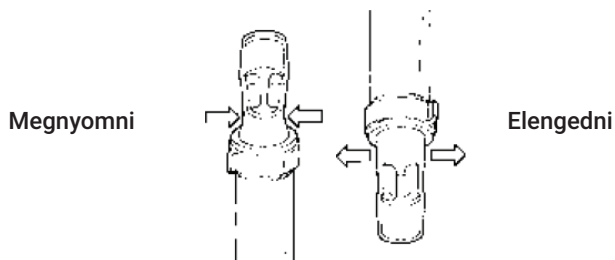


- Tartsa az etetőt álló helyzetbe. Szorítsa meg a blokkok alatt, hogy kiszorítsa belőle a levegőt a tartályból (ld fenti illusztráció).
- Tartsa az etetőt miközben szorítva lefelé fordítja.
- Most engedje el a blokkokat. Ekkor egy kevés folyadék fog folyni a tartályba.
- Ismétlje meg a fenti lépéseket amíg a tartály meg nem telik.

Megjegyzés: Ha a tartály nem töltődik meg rendszeren, ellenőrizze, hogy a nyílás nyitva van-e. Ujjal nyomja meg, hogy segítse a folyadék folyását.

Etetés

- Tartsa az etetőt vízszintesen, enyhén felfelé néző szögben (ld. jobb oldali kép). Ha így tartja a palackot, automatikusan újratöltheti a tartályt etetés közben, az etető blokkok alatti megnyomásával.
- Gyengéden nyomja meg a két blokkot a tartály mindkét oldalán, hogy a folyadék továbbfolyjon a tartály etetőfejrészébe.
- Érintse meg a csecsemő ajkát a tartály hegyével, hogy a szája kinyitására készítse.
- Helyezze a tartályt a csecsemő alsó ajkára (úgy, hogy az etetőfej felfelé nézzen). Óvatosan tapintson rá az etetőre, hogy a tartályban gyülemlő folyadék továbbfolyjon. Általában a gyermek automatikusan nyalni kezdi az etetőfejet.

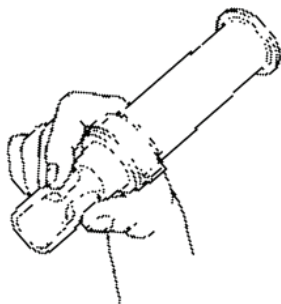

Megjegyzés: Ha az etető szivárog, ellenőrizze, hogy az etető helyesen lett-e összeszerelve.

Termékvariáns és pótalkatrészek

Cikkszám.	Használati útmutató
820.7004	Tartály, 1 (kórház)
800.0852	Szeleplemez, 25 (kórház)
810.7066	Fedél, 1 (kórház)
810.0137	Üveg, 1 (kórház)

Alapanyag: Tartály és szelep membrán: szilikon; többi: polipropilén.



Hulladékkezelés: A helyi szabályzatok szerint.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a csomagolás olyan terméket tartalmaz, amely az élelmiszerral való érintkezésre lett tervezve a 1935/2004 szabályzatnak megfelelően.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket távol kell tartani a napfénytől.